

KilRoid®

KERTAKÄYTTÖINEN PERÄPUKAMIEN
IMULIGAATTORI

KilRoid™ on kertakäyttöinen peräpukamien imuligaattori, joka on aina valmis käytettäväksi. Puhdistusta tai desinfiointia ei tarvita. Ligaattoria käytetään yhdellä kädellä – kirurgi voi kontrolloida proktoskooppia ja ligaattoria ilman, että tarvitaan avustavaa henkilökuntaa. Tästä johtuen KilRoid™

säästää aikaa ja vähentää kustannuksia (1, 2).


Kun tarvitaan entistä parempaa näkyvyyttä, KilRoidia voidaan käyttää yhdessä videoendoskooppisen proktoskoopin kanssa vaihtoehtona endoskooppiselle ligatoinnille (3).

Kuinka KilRoidia käytetään


Lataaminen



Ennen kuin ligointi aloitetaan, Kilroid pitää ladata silikonisella kumilenkillä. Lataaminen voidaan suorittaa helposti käyttämällä tähän tarkoitukseen suunniteltua ainutlaatuista sovitinta.

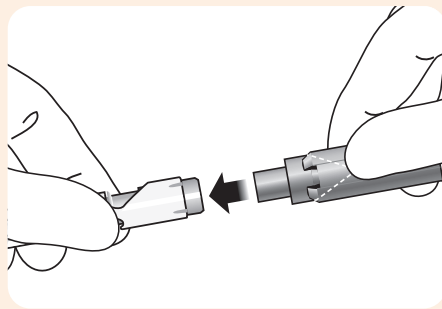


1. Aseta sovitin Kilroid-instrumentin imukärkeen.
HUOM! Varmista, että sovitin on tiukasti imukärjessä niin, että niiden väliin ei jää tilaa.

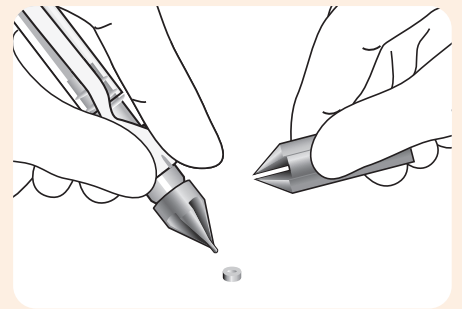


2. Aseta kumilenkki sovitimen kärkiosaan.


Toimenpide

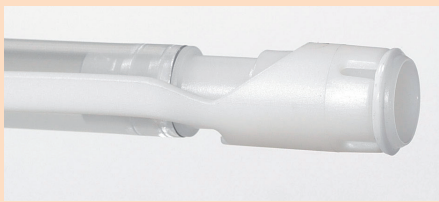

Kun KilRoid on ladattu, se on valmis käytettäväksi. Koska KilRoidia käytetään yhdellä kädellä, kirurgi suorittaa ligatoinnin yksin käyttäen toisella kädellä proktoskooppia ja toisella ligaattoria. Avustajaa ei tarvita.

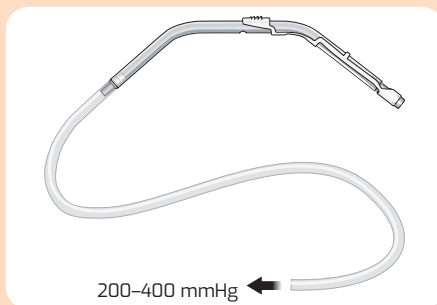


1. Yhdistä KilRoid-instrumentti imulähteeseen.

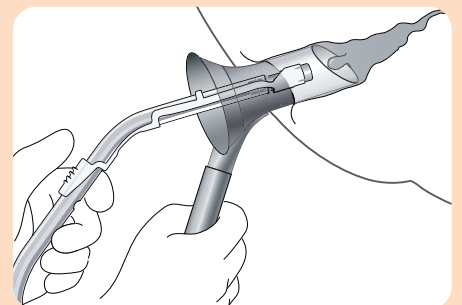


2. Pidä proktoskooppia toisessa kädessä ja tarkista peräpukaman sijainti. Vie toisella kädellä instrumentti proktoskoopin läpi, kunnes imukärki on pukaman päällä.


- **Käytännöllinen** – puhdas instrumentti on aina valmis käytettäväksi
- **Säästää aikaa** – puhdistusta ja desinfektiota ei tarvita, toimenpiteiden määrää voidaan lisätä
- **Avustavaa henkilöä ei tarvita** – voidaan käyttää yhdellä kädellä, parempi näkyväisyys ja tarkkuus paranee
- **Hygieeninen** – suojaa potilasta, toimenpiteen suorittajaa ja hoitohenkilökuntaa infektioilta (2) – tuotteen hävittäminen käytön jälkeen vähentää infektioiden tarttumisvaaraa
- **Ainutlaatuinen latauslaite** – kumilenkkien lataaminen helppoa
- **Kumilenkit eivät sisällä lateksiä** – allergisten reaktioiden riski vähenee

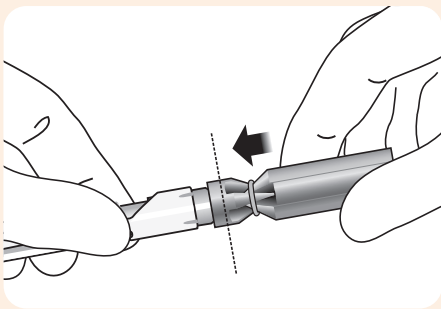


3. Aseta levitin sovittimen kärkiosaan ja työnnä molemmat osat yhteen lovetusten kohdalta – näin kumilenkki laajenee ja se liukuu sovittimen päälle.

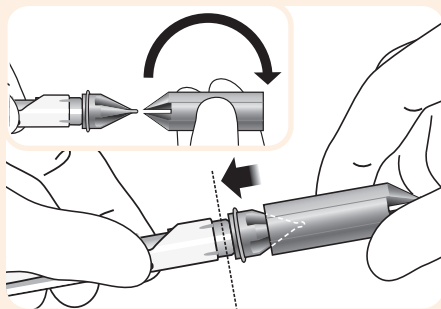


4. Vedä levitin irti sovittinosasta ja käännä levitin toisin päin (180°) siten, että levittimen avoin pää on sovittinta kohti. Työnnä silikoninen kumilenkki instrumentin imukärkeen suoraan tai pyörittävällä liikkeellä.

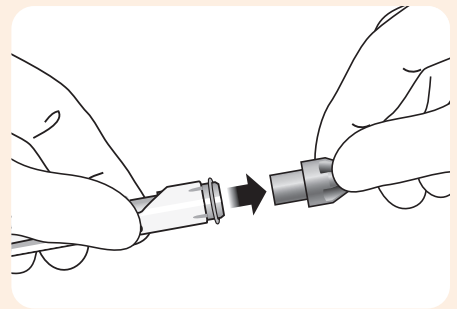


5. Poista sovitin – kumilenkki on nyt imukärjen päällä ja instrumentti on käyttövalmis.

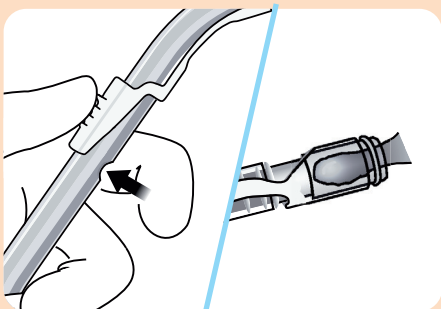

3. Imunsäätöaukko peitetään sormella ja imukärki imee pukaman instrumenttiin.

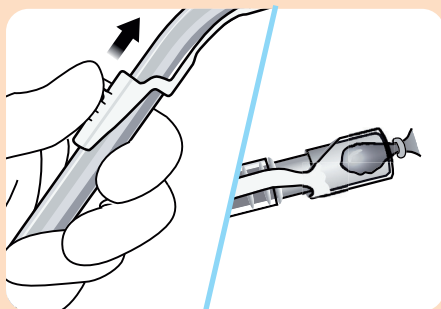


4. Laukaisinta käytetään työntämällä sitä peukalolla eteenpäin. Tällöin lenkki liukuu imukärjen yli peräpukaman tyveen.

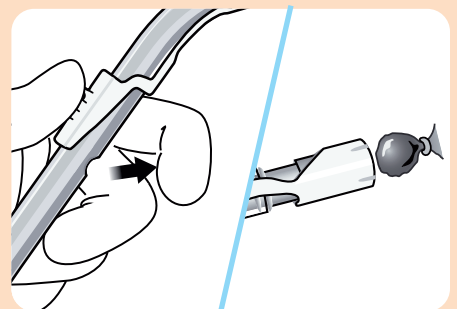

5. Instrumentti poistetaan avaamalla imun säätöaukko.

Jos samalla potilaalla hoidetaan useampia pukamia, Kilroid voidaan ladata uudelleen silikonisella kumilenkillä. Hävitä Kilroid, kun potilas on hoidettu.

KilRoid®

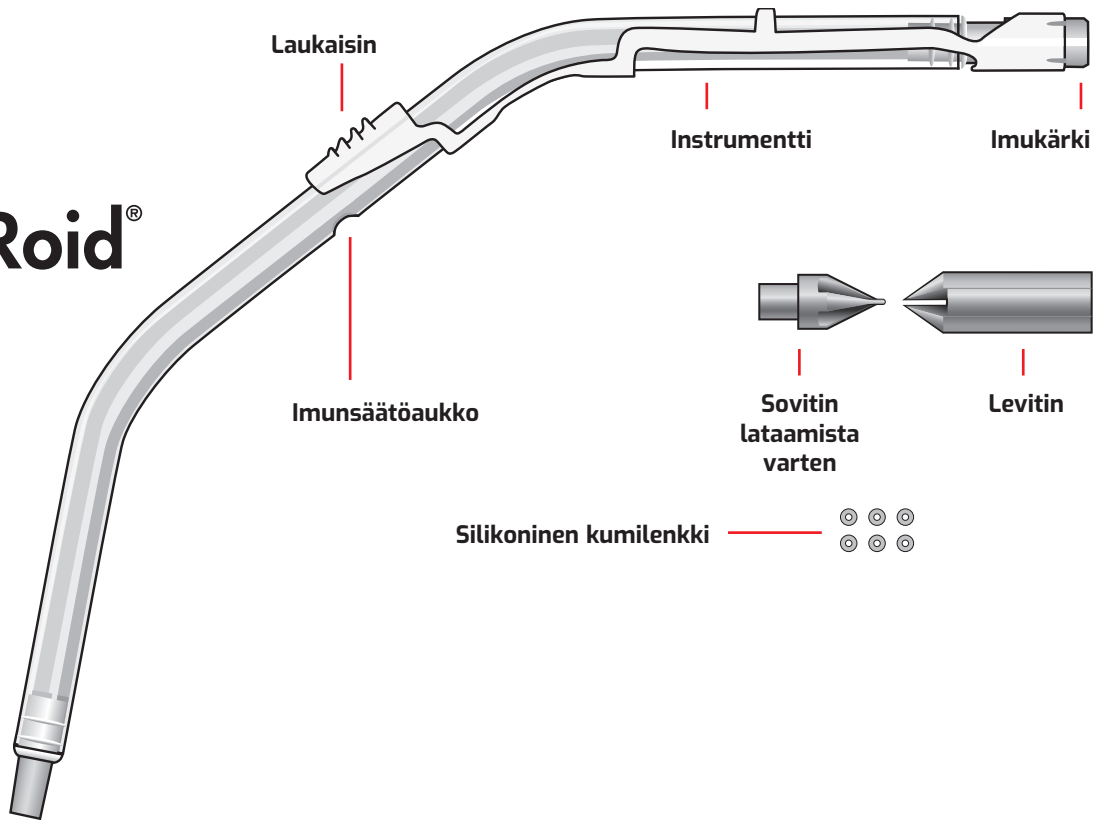

Tuotekuvaus

Materiaalit

PETG (instrumentti), PVC (letku), polyamidi (laukaisin), polypropyleeni (sovitin lataamista varten), ABS (levitin, yhdistäjä), silikoni (kumilenkki).

Kertakäyttöinen

Kaikki osat ovat kertakäyttöisiä. Älä käytä, mikäli pakkaus on avautunut tai vahingoittunut.

1tuotevalikoima – KilRoid®

Tuotenumero

67401	1x30	KilRoid™ 2m letku
67400	1x30	KilRoid™ ilman letkua

Valmistaja: Mediplast AB / www.mediplast.com

Viitteet:

1. Gallo, G et al.: Techniques in Coloproctology (2020) 24:145–164
2. Salgueiro, P et al.: GE Port J Gastroenterol 2020;27:90–102
3. Dickey W, Garrett D, Am J Gastroenterol, 2000;95:1714-16.